

AQUAPURE LED

T3PACKAQ2SC

L'AQUA-PEELING POUR
UNE PEAU VISIBLEMENT PLUS JEUNE



LED



MICRO-DERMABRASION



DERMO-DÉPRESSION



PRINCIPES ACTIFS

Appareil multifonctionnel de soins du visage et du corps, **AQUAPURE LED** combine des abrasions sur peau sèche ou avec application d'une lotion et des soins LED. Équipé de pièces à main à la pointe de la technologie pour fournir des ingrédients exfoliants et antioxydants, **AQUAPURE LED** permet d'améliorer l'hydratation, l'élasticité de la peau ainsi que le processus de régénération cellulaire.

Avantages

- Alliance de la dermabrasion sèche et de l'aqua-dermabrasion
- Dôme LED avec 3 longueurs d'ondes
- Pulvérisation de 3 solutions cosmétiques riches en principes actifs
- Protocoles visages et corps : visage, vergetures, mains
- Compatible avec toutes les marques de cosmétiques

Résultats

- Peau hydratée et nourrie en profondeur
- Peau purifiée, élimination des points noirs et cellules mortes
- Peau visiblement rajeunie, action anti-rides
- Réduction visible des imperfections cutanées

Caractéristiques techniques

Technologies	Dermabrasion, Aquapeel, LED
Écran	Écran tactile
Puissance électrique	AC 100~240 V, 50 / 60 Hz

Poids	14 kg
Dimensions (L x l x h)	365 x 523 x 460 mm
Certification	CE





Dermabrasion sèche

Le peeling au diamant élimine les cellules mortes de la peau, améliore le tonus et la texture. La technologie combinée AD Peel exfolie les cellules mortes de la peau et nettoie les pores en profondeur afin de maximiser les effets de la microdermabrasion. Les 9 embouts de différentes tailles permettent de cibler différentes zones du visage et du corps.




Aqua Dermabrasion

La technologie Aqua Dermabrasion permet d'exfolier la peau tout en pulvérisant successivement 3 solutions aux actifs émoullissants et hydratants.

La surface de la peau est aspirée, éliminant les points noirs et les peaux mortes, tandis que l'AQUASOLUTION est appliquée dans les couches plus profondes de la peau.

Puissance d'aspiration supérieure (dermo-dépression) : AQUAPURE LED possède une puissance d'aspiration encore plus poussée pour une meilleure absorption des cellules mortes et une meilleure purification des pores.

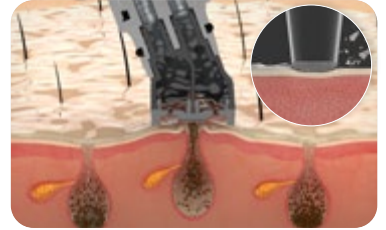

Principes Actifs AQUASOLUTION

La combinaison d'extraits naturels, d'acide hyaluronique et d'un complexe de Peptides vient compléter l'action des technologies, prodiguant à la peau les meilleurs nutriments.



Seaweed Complex



Propolis Extract



Centella Asiatica TECA



Peptide Complex



Peel+ V1AQP01

La première étape du soin consiste en un nettoyage de la peau en profondeur, sans irritation, pour enlever les cellules mortes et impuretés.

Riche en acide lactique



Sebo+ V1AQS01

Dans un deuxième temps, SEBO+ mène une action pour dissoudre les excès de sébum, traiter les points noirs et resserrer les pores. La peau régule la production de sébum et retrouve son équilibre en termes d'hydratation.

Riche en acide salicylique + zinc



Rejuve+ V1AQR01

Ce produit restaure l'élasticité de la peau en favorisant la production de collagène et d'élastine. Il améliore l'hydratation de la peau.

Riche en acide hyaluronique + collagène + gelée royale



Dôme LED Lightpure

Le dôme LED émet 3 types de lumières, chacune avec des longueurs d'onde différentes :

- Bleue (465nm) pour une réduire les imperfections, réguler le sébum et purifier la peau
- Rouge (625nm) pour une action anti-âge, lisse les rides et ridules et améliore l'élasticité de la peau
- Vert (520nm) pour réduire l'hyperpigmentation, les taches brunes et unifier le teint

Combiner la technologique de l'Aquapure LED aux cosmétiques LUMIXA pour des soins encore plus performants (voir p.104)

Lumixa est un soin multi-action unique qui contient des chromophores brevetés dotés d'un profil énergétique spécifique pour réparer, régénérer et dynamiser la peau.

Composition des packs de la gamme Lumixa :

- 1 tube de gel activateur
- 5 tubes de principes actifs contenant les chromophores, 1 tube = 1 séance
- 1 gobelet pour effectuer le mélange
- 1 spatule

