

Dermablade®

T2ALTDERMA01

LASER ERBIUM YAG A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE



Dermablade® est l'appareil de choix pour les traitements dermatologiques, avec plus de 4 000 installations à travers le monde.

Ce laser Er:YAG de dernière génération est perfectionné pour l'ablation cutanée de haute précision et le traitement fractionné.

Dermablade® a un degré de précision se mesurant en micron et permet d'éliminer une grande variété de lésions en toute sécurité. Sa longueur d'impulsion ajustable facilite la coagulation tandis que son mode thermique réduit les saignements. Les petites lésions peuvent être traitées sans anesthésie. Et une anesthésie locale est suffisante pour les traitements de relissage des rides profondes.

7 pièces à main disponibles



VARIOSPOT

1 mm – 6 mm Ø

(inclus)



MICROSPOT

13 x 13 mm²

(inclus)



DEEPSPOT

8 mm Ø

(en option)



JULIET

9 x 9 mm²

(en option)



ROMEO

5 x 5 mm²

(en option)



CUT

0,5 mm Ø

(en option)



FINELINER

1,5 mm Ø

(en option)

Traitements cutanés ablatifs et fractionnés de haute précision.

Indications

- Rajeunissement
- Resurfaçage
- Traitement des cicatrices
- Traitement intravaginaux
- Traitement anti-ronflement



Avantages

- Faisceaux laser très précis pour le traitement des couches superficielles de la peau, permettant un contrôle optimal
- Extracteur de fumée intégré
- Puissance maximale combinée à une durée d'impulsion flexible
- Port de pièce à main unique pour un changement de pièce à main rapide
- Pédale de commande sans fil (en option)



La pièce à main **Variospot** permet une ablation homogène sur toute la surface du spot grâce à la technologie Flat Top.

PAM VarioSpot



Resurfaçage cutané



1 semaine après traitement



Kératose séborrhéique



3 semaines après traitement




Avec son système breveté, la pièce à main **Microspot** délivre 169 spots d'un coup avec une énergie homogène pour un taux de recouvrement de 10% à 25%.

PAM MicroSpot



Resurfaçage cutané

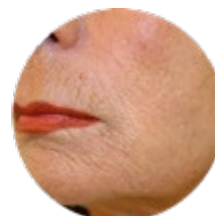

1 semaine après traitement



Cicatrices d'acné



1 semaine après traitement

Caractéristiques techniques

Laser	Laser Er : YAG, classe 4
Longueurs d'onde	2940 nm
Énergie	Max. 3J
Durée du Pulse	100µs – 1500µs
Fréquence	1 à 10 Hz

Fluence	Max. 250 J/cm²
Surface d'émission	Variospot : 1-6 mm Ø Microspot : 13 x 13 mm² Deepspot : 8 mm Ø Finliner : 1.5 mm Ø Steri-Spot : 9 x 9 mm² Romeo : 5 x 5 mm² CUT : 0.5 mm
Modes	Spot variable, fractionné froid, fractionné chaud

Écran	Écran tactile LCD 10,1 pouces
Taille	40 x 90 x 95 cm
Poids	environ 115 kg
Certification	CE médical