

# EPIL&CARE

T2EPILC02

AUCUN POIL NE LUI RÉSISTE



De nombreuses années de recherche ont permis au fabricant et son équipe d'ingénieurs de concevoir le **COURANT PULSÉ ÉPILATOIRE**.

Inspiré de la méthode ancestrale de l'électrolyse, le **COURANT PULSÉ ÉPILATOIRE** est à la pointe de la technologie. Il révolutionne l'épilation définitive<sup>(1)</sup> grâce au concept de courant à modulations vectorielles.


Plus précis et plus stable que toute autre technologie existante, le **COURANT PULSÉ ÉPILATOIRE** utilise un segment de deux millisecondes afin de maximiser le transfert d'énergie à travers le follicule. Les modulations vectorielles modulent le courant en intensité et en durée pendant que le filament est inséré dans le follicule.

## Avantages

- Technologie 100% canadienne, leader dans les techniques d'épilation par électrolyse
- Technologie très performante pour tous les types de poils - très fins à épais; blancs, clairs, roux, foncés ou avec reflets
- Efficace sur toutes les couleurs de peaux
- Efficace et idéal sur toutes les zones que la lumière pulsée ou le laser ne peuvent pas traiter

1


Le filament est glissé le long du canal pileux.

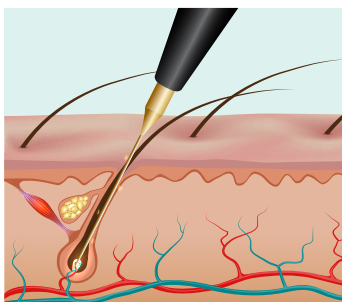

2


Le courant pulsé épilatoire est envoyé.

Ceci génère une chaleur\* qui détruit les cellules germinatives responsables de la pousse du poil.

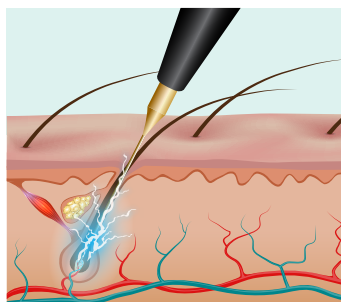

3

Après le retrait du filament, le poil est extrait avec une pince à épiler sans aucune résistance.

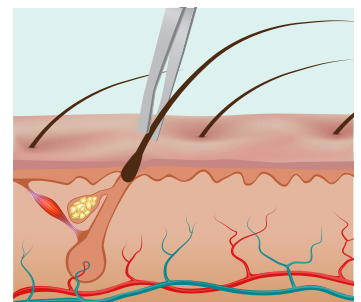



Établie depuis 1965, Silhouet-Tone est une société canadienne qui se démarque dans l'industrie de la beauté par sa capacité à innover et à utiliser une technologie de pointe.

## ACCESSOIRES INCLUS AVEC L'APPAREIL

**Filament deux pièces** avec forme cylindrique et flexible avec une pointe arrondie. Vous pouvez choisir plusieurs calibre du filament selon l'épilation du poil, la grosseur de l'ostium, la région traitée et la technique de travail que vous utilisez. Plus le calibre du filament est fin, plus la concentration d'énergie est importante.



### → Filaments isolés :

T7ECFILF2S - Filament isolé F2 short/50  
T7ECFILF3S - Filament isolé F3 short/50  
T7ECFILF4R - Filament isolé F4 regular/50  
T7ECFILF5R - Filament isolé F5 regular/50

### → Filaments non isolés :

T7ECFILF2S - Filament non isolé F2 short/50  
T7ECFILF3S - Filament non isolé F3 short/50  
T7ECFILF4R - Filament non isolé F4 regular/50  
T7ECFILF5R - Filament non isolé F5 regular/50



**Porte-filament ergonomique** T7ECPFCOURT02 & T7ECPFLONG02  
(2 tailles inclus avec l'appareil) :

- ✓ Précis, qualitatif et hygiénique
- ✓ Permet une meilleure diffusion des courants
- ✓ Prise en main confortable pour un geste plus précis
- ✓ Universel, s'adapte à toutes les tailles de mandrin



**Rouleau de l'ontophorèse** (inclus avec l'appareil) : le mode « iontophorèse » permet d'offrir des soins pré et post-épilatoires.



### **Lotion Pré-épilatoire** 500 ml - T7ECLOTION01

Lotion avant épilation CPE pour désinfecter la peau tout en procurant une sensation de fraîcheur.

**Actions** : anesthésiante, astringente, désinfectante, bactéricide, calmante, cicatrisante.

**Principes actifs** : lavande, romarin, citron, camphre.



### **Gel Post-épilatoire** 500 ml - T7ECGEL01

Gel avant et après l'épilation CPE pour préparer et apaiser les rougeurs.

**Actions** : nutritif, régénérant, revitalisant, hydratant, anti-inflammatoire, apaisant, calmant.

**Principes actifs** : aloe vera, arnica, réglisse.

## Caractéristiques techniques

|                         |                              |                        |                    |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Alimentation électrique | 110-240 V / 50-60 Hz – 1,7 A | Dimensions (L x l x h) | 330 x 330 x 230 mm |
| Écran                   | Tactile                      | Poids                  | 4 kg               |
| Fréquence               | 6,78 MHz                     | Certification          | CE                 |