

MEDIOSTAR®

T2MEDIOSTAR


LASER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE



MEDIOSTAR incarne la polyvalence dans le domaine de l'esthétique médicale. Ce laser répond à une large gamme de traitements esthétiques, comprenant l'épilation, le rajeunissement cutané, le traitement de l'acné et des lésions vasculaires. Sa puissance maximale de sortie de 5000 Watts et ses impulsions ultra courtes en font l'un des lasers les plus performants sur le marché.

Les nouvelles pièces à main Monolith se démarquent par leur solidité, leur légèreté et leur ergonomie améliorée qui offrent des performances optimales. L'interface utilisateur permet une manipulation facile et un contrôle précis des paramètres de traitement.

La conception sophistiquée et les fonctionnalités avancées de MeDioStar offrent des résultats efficaces et sûrs pour les patients, répondant aux normes les plus élevées de l'esthétique médicale.

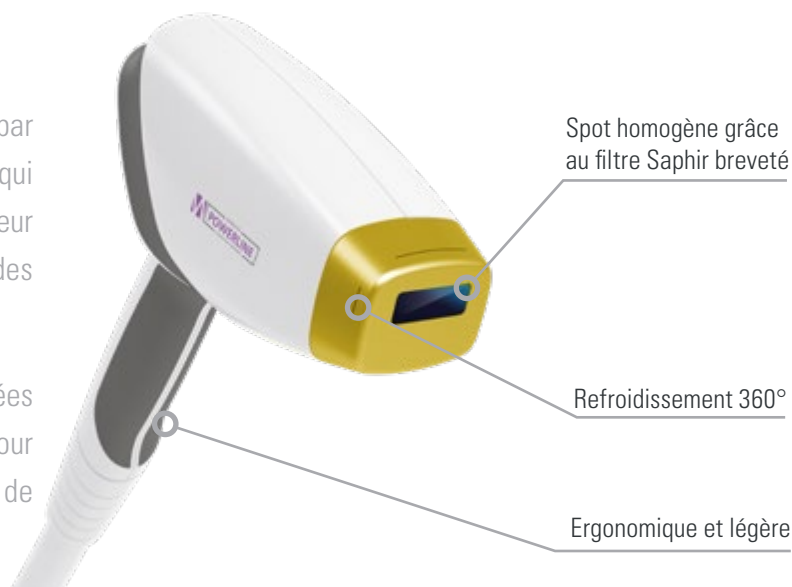

Une gamme étendue comprenant un choix de 10 pièces à main LASER

Poids des pièces à main 750g maximum • Toutes zones et phototypes 1 à 6 grâce aux différentes longueurs d'onde

S	M	L	XL	PowerLine L	PowerLine YAG	PowerLine MIX	ALX	PowerLine V	Kobra
1 cm²	1,5 cm²	3 cm²	10 cm²	3 cm²	3 cm²	3 cm²	1,4 cm²	0,12 cm²	3 cm²
810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm	1060 nm	808/1060 nm	760/940 nm	940 nm	680/1800 nm
1275 W	1700 W	3400 W	5000 W	5000 W	4000 W	5000 W	560 W		

ÉPILATION PROFESSIONNELLE D'EXCEPTION



Indications

- Épilation définitive⁽¹⁾
- Traitement des lésions vasculaires
- Traitement de l'acné et des cicatrices d'acné
- Rajeunissement cutané
- Traitement des lésions pigmentaires

Avantages

- Synergie unique de longueur d'onde
- Spot laser homogène le plus grand du marché : 10 cm²
- Traitements rapides et indolores
- Traitements adaptés à tous les types de peaux
- Refroidissement de la peau à 360°
- Cadence élevée (rapidité du soin) = 3 à 400 pulses/ms
- Guéridon multifonctionnel
- Pédale sans fil (en option)

Réalisez vos soins en un temps record !

Gain de temps pendant les séances = Plus de patients traités = Rentabilité boostée



Spot homogène en mono pulse et mono glissé



Cadence élevée (rapidité du soin) = 3 à 400 pulses/ms



Taille des spots jusqu'à 10 cm



Système de refroidissement 360° intégré

Jambes entières en :

4 min avec applicateur XL

8 min avec applicateur L

10 min avec applicateur M



Fini le gel !

SPRAY LASER SKIN CARE (T1SPRAYLASER)

- Purifie** : Vaporisé sur la zone ciblée avant le début du traitement, il nettoie la peau en douceur.
- Glisse** : Pendant le traitement, il assure un déplacement sans friction ni de sensation collante au niveau de la pièce à main sur la peau.
- Répare** : Après la séance, l'excédant de produit peut être délicatement massé sur la peau, la laissant douce et hydratée, offrant ainsi un excellent soin post-laser.

CAPS HYGIÉNIQUES LASER JETABLES (T8EPILABCAP)

pour un entretien facile des pièces à main



Caractéristiques techniques

Laser	Laser diode haute puissance, classe 4
Longueurs d'onde	680, 760, 810, 940, 1060, 1800 nm*
Puissance	Max. 5000 W*
Durée du Pulse	3 – 400 ms*

Fréquence	Max. 20 Hz*
Fluence	Max. 210 J/cm ² *
Surface d'émission	Max. 10 cm ² *
Modes	MonoPulse, SmoothPulse

Écran	Écran tactile LCD 10,1 pouces
Taille	41 x 71,5 x 97 cm
Poids	65 kg
Certification	CE médical

* selon la pièce à main beauty tech med