



ULTRAFORMER III

T3PACKMKTUF3

**LE DISPOSITIF HIFU N°1 DES VENTES
DANS LE MONDE !**



Upliftiez votre visage, réduisez vos rides, et remodelez votre corps

ULTRAFORMER III, appareil de technologie HIFU optimal et non invasif, permet de lifter et de raffermir le visage pour une peau plus jeune et une silhouette affinée.

Grâce à la précision de chaque impulsion, les transducteurs HIFU sont conçus pour stimuler la fabrication de collagène afin d'éliminer les rides du visage et le relâchement de la peau.

Le dispositif est livré avec les 7 cartouches de traitement. Grâce à ses 2 pièces à main incluses, vous bénéficiez d'une grande praticité pour passer d'une cartouche à l'autre lors de vos protocoles de soins.

Avantages

- Technologie Multi-Focalisée précise sur plusieurs couches de tissus pour un effet de lifting optimal
- Système deux moteurs puissants
- Mécanisme durable de la pièce à main
- Conception innovante et interface utilisateur conviviale

Résultats

- Atténue rides et ridules
- Redessine l'ovale du visage
- Réduction du double menton
- Lutte contre le relâchement cutané
- Réduction de la masse grasseuse



Caractéristiques techniques


Technologie	HIFU
Affichage	Écran tactileD
Alimentation électrique	100 - 240V~, 50/60Hz

Dimensions (L x l x h)	515 x 500 x 1310 mm
Poids	35 kg
Certification	CE médical



Phase inflammatoire


Après le traitement, la zone ciblée par les points de coagulation subit un certain nombre de réactions biochimiques qui induit une migration des cellules environnantes.

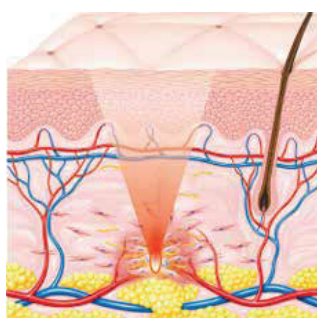

- Coagulation de la peau
- Migration cellulaire

Phase de prolifération


48 heures après le traitement, on observe la réparation tissulaire sous forme d'un tissu conjonctif jeune appelé tissu de granulation, riche en néo-capillaires et en cellules. Les fibroblastes ainsi recrutés vont commencer à fabriquer un nouveau collagène.

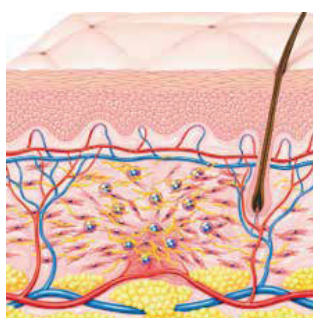

- Tissu de granulation
- Synthèse du collagène

Phase de remodelage


Au cours des 3 semaines à 6 mois suivant le traitement, le tissu devient un tissu composé essentiellement de fibres de collagène. Puis, une nouvelle vague de fibroblastes va migrer au sein de ce tissu pour fabriquer un neoderme riche en fibres de collagène qui donnera à la peau un aspect raffermi.

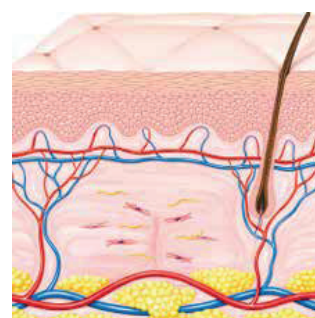

- Renouvellement du collagène
- Lifting et raffermissement de la peau


Microfocalisation

Les cartouches dotées de faisceaux ultrasonores très concentrés délivrent de la puissance avec exactitude et précision à la région focale spécifiée.

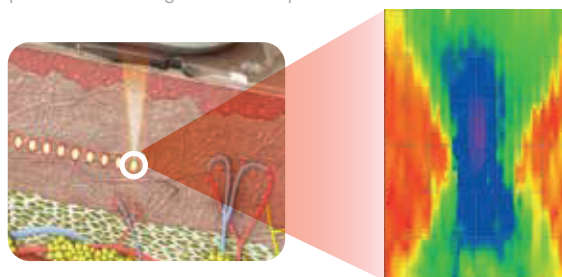

Macrofocalisation

Les cartouches à basse fréquence permettent une pénétration plus profonde de la région focale avec une plus grande densité d'énergie.

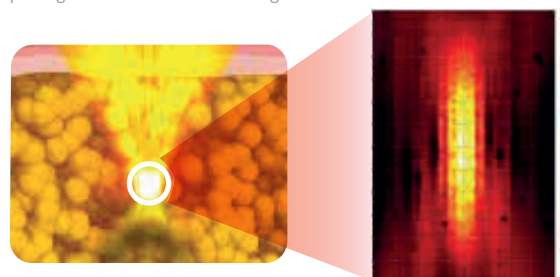


Avant

Immédiatement après le traitement



Avant

Immédiatement après le traitement

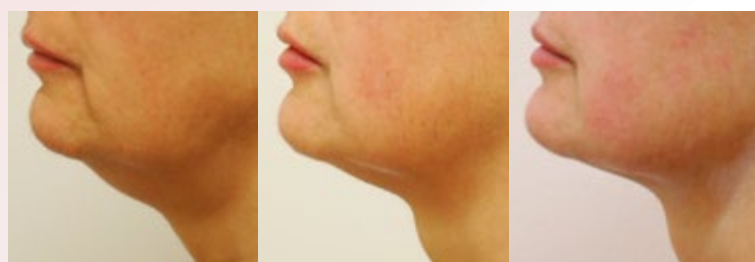

Avant

Immédiatement après le traitement

6 mois après traitement



Avant

Immédiatement après le traitement